

注意事項

■ ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 危険



- ・ 機器を開けたり、製品を改造しないでください。
- ・ お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、洗剤、液体を内部に入れないでください。
- ・ 火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 機器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。

⚠ 注意




- ・ 異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜き、製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ・ 15 歳以上のほとんどの方はマウスピースを咥えられますが、不適合や違和感がある場合は使用をおやめください。
- ・ 機器は水洗いし清潔にしてご使用ください。
- ・ この機器の保証は国内に限り有効です。


使用適用年齢：15 歳以上（マウスピースが違和感なく口にはめられる方）

各部の名称


■ 本体

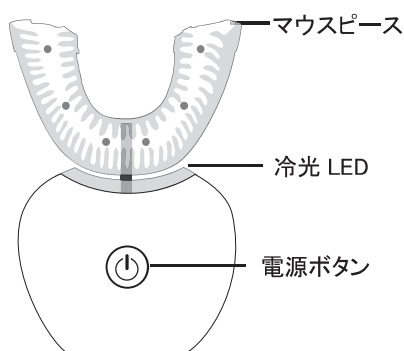


■ 充電台

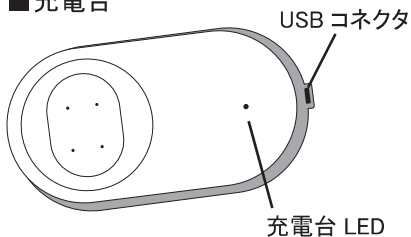

電源アダプター

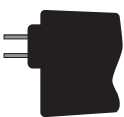


USB 電源ケーブル

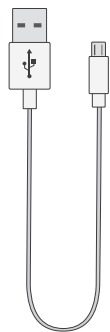

充電方法

1. 充電台を USB 電源ケーブルで電源アダプターに接続し、コンセントに差し込みます。（電源が供給されている場合は充電台 LED が青点灯します。）
2. 本体を充電台に接点が合うように置きます。正しくセットされている場合、本体の冷光 LED が青点灯します。

充電表示 充電中は本体 LED が点滅し、満充電になると連続点灯します。

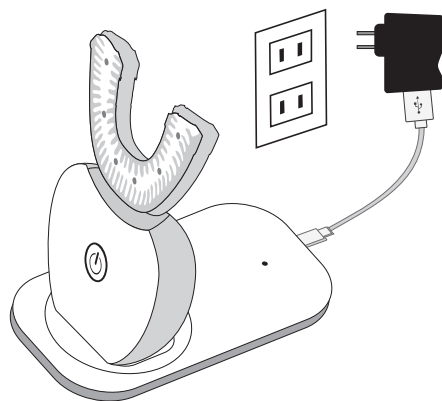

操作方法

【電源オン】 電源ボタンを押すと電源 ON になります。

【電源オフ】 電源ボタンを長押しすると電源 OFF になります。


※電源は約 40 秒で自動 OFF になります。（ホワイトニングモードを除く。）



【モードの切替】 本製品はブラッシング・ホワイトニングのモードを切り替える機能があります。電源ボタンを押すことでモードの変更ができます。お好みに合わせてご使用ください。

モード名	機能
ホワイトニングモード	冷光のみでホワイトニングプロセスをスピードアップします。
快適モード	弱めに振動して洗浄します。
強力洗浄モード	強めに振動して汚れを除去します。
微弱振動モード	わずかに振動しながら洗浄します。

使用方法

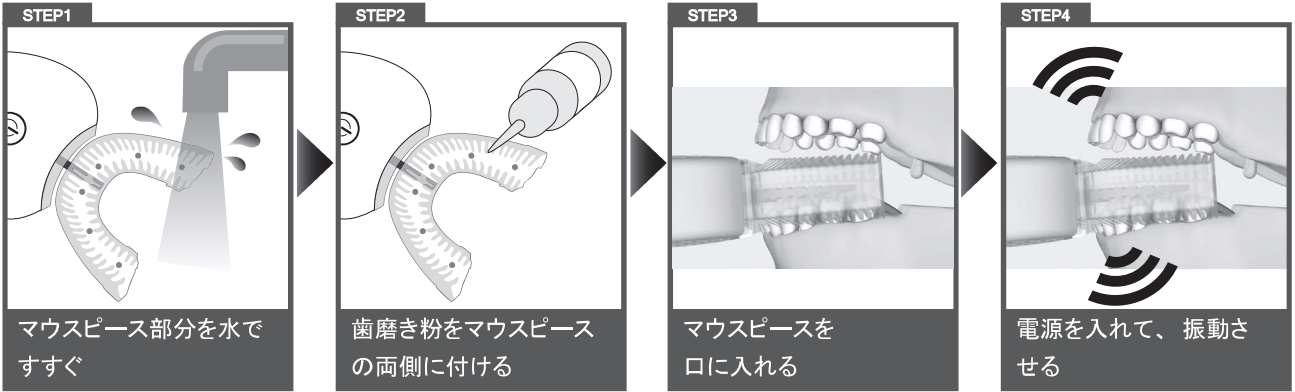

※ 専用の歯磨きホワイトニングジェルを使用すると、歯を研磨する事なく、歯磨き効果とホワイトニング効果が得られます。（研磨剤が入っていないので入れ歯にも使用ができます。）

※ お手持ちの歯磨き粉でも使用可能ですが、入れ歯には一般の歯磨き粉を使用しないでください。

マウスピースの交換


■ マウスピース交換の目安

汚れたらお取替えください。（標準交換期間：3～6ヶ月）

■ マウスピース交換方法

ドライバーなどでマウスピースの下部のシリコン部分をひっぱり、引き抜きます。

※取り外しの際、尖ったものでマウスピースを引っ張ると破れる場合がありますのでご注意ください。

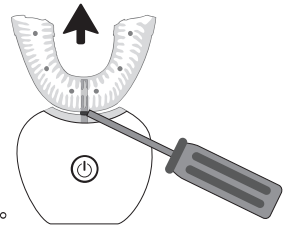


お手入れ方法

■ 使用後はマウスピース及び本体を水洗いして汚れを落とし、自然乾燥させてください。

■ マウスピース部分の洗浄方法

- ①容器に水を張ります。
- ②マウスピース部分を水につけ、【強力洗浄モード】にし、数秒間洗浄してください。

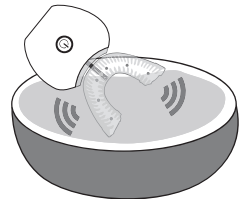

仕様 ※仕様は予告なく変更される場合があります。

電源	USB 電源 (DC5V/1A)	カラー	ホワイト
サイズ	約 70×65mm、約 110g	振動数	約 17kHz
電池	フル充電で約 2 週間 (1 日 2 回程度使用)	防水	IPx7
材質	【本体】ABS、【マウスピース】シリコン樹脂		
同梱物	本体 (マウスピース組込み済み)、予備マウスピース (1 個)、充電台、USB 電源ケーブル、電源アダプター、ホワイトニングジェル (3 本)、説明書 (本紙)		

消耗品購入について

■ 交換用マウスピース (型番: TOOTH-WHITE-MUS) とホワイトニングジェル (型番: TOOTH-WHITE-GEL) のご購入については、

<http://www.broadwatch.jp/>



または、<メール> support@broadwatch.jp にご相談ください。

サポート

■ 注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp>

メール support@broadwatch.jp 電話 050-3786-0010 ※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。